

Comment utiliser une ampoule « OPC » contenant le diluant pour reconstituer le ROR (V)

Vaccins Priorix, Priorix Tetra, Varilrix

Version 02 (22 juin 2022)

Les nouvelles ampoules contenant le diluant pour reconstituer le vaccin sont des ampoules avec système d'ouverture à un point (*One Point Cut* ou *OPC*) (voir la figure 1 ci-dessous) :

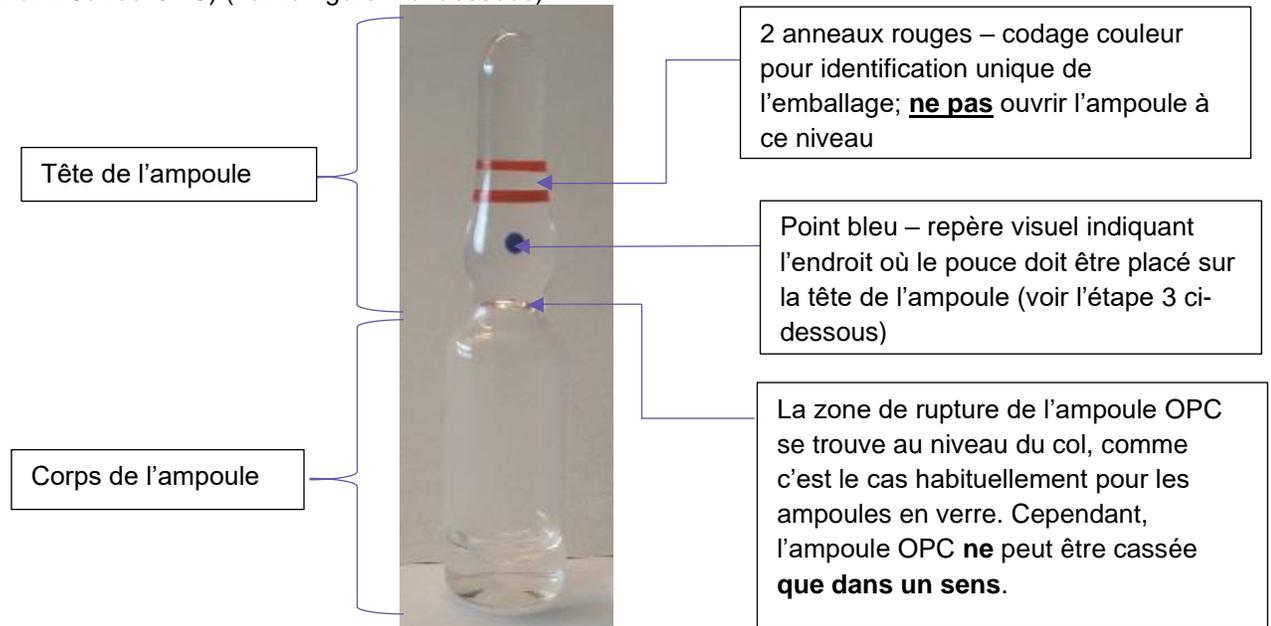


Fig 1. Éléments clés de l'ampoule OPC de GSK

Utilisez votre main dominante pour le bon positionnement sur l'ampoule lorsque vous visionnez la vidéo ci-jointe et lisez les directives ci-dessous.

Directives de la vidéo :

En plus des renseignements contenus dans le présent document, vous trouverez ci-joint une vidéo informative créée par le fabricant de cette ampoule OPC (Schott).

Comment utiliser une ampoule « OPC » contenant le diluant pour reconstituer le ROR (V)

Vaccins Priorix, Priorix Tetra, Varilrix

Version 02 (22 juin 2022)


Directives écrites :

Préparation de l'ampoule :


S'assurer que la totalité du liquide se trouve dans la partie inférieure (corps) de l'ampoule; faire descendre tout liquide qui pourrait être dans la tête de l'ampoule en la tapotant doucement.

1/ Tenir le corps de l'ampoule avec la main gauche, en **s'assurant que le point bleu est orienté vers soi**.

2/ Tenir la tête de l'ampoule avec la main droite, en plaçant le pouce sur le point bleu (voir l'image à droite).

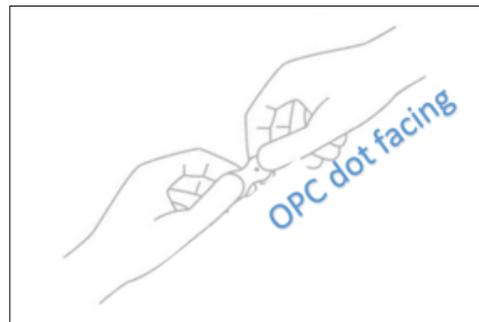

Incliner l'ampoule à un angle de 45° (voir l'image à droite).

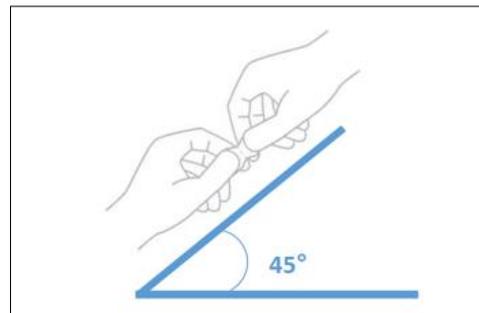

Comment utiliser une ampoule « OPC » contenant le diluant pour reconstituer le ROR (V)

Vaccins Priorix, Priorix Tetra, Varilrix

Version 02 (22 juin 2022)


3/ Tenir fermement le corps de l'ampoule avec la main gauche. Le pouce droit bien appuyé sur le point bleu, pousser vers l'extérieur, en exerçant un effet de levier sur le col de l'ampoule et en opposant une résistance avec l'index gauche (point de pression). Il importe de maintenir une force constante pour obtenir une ouverture nette.

L'ampoule se cassera au niveau du col, et la partie supérieure se séparera vers l'extérieur (voir l'image ci-dessous).

Ne pas ouvrir l'ampoule d'une manière autre qu'en appuyant sur le point bleu avec le pouce.

Ne pas ouvrir l'ampoule en faisant pivoter la tête sur elle-même.

Ne pas ouvrir l'ampoule au niveau des 2 anneaux rouges.

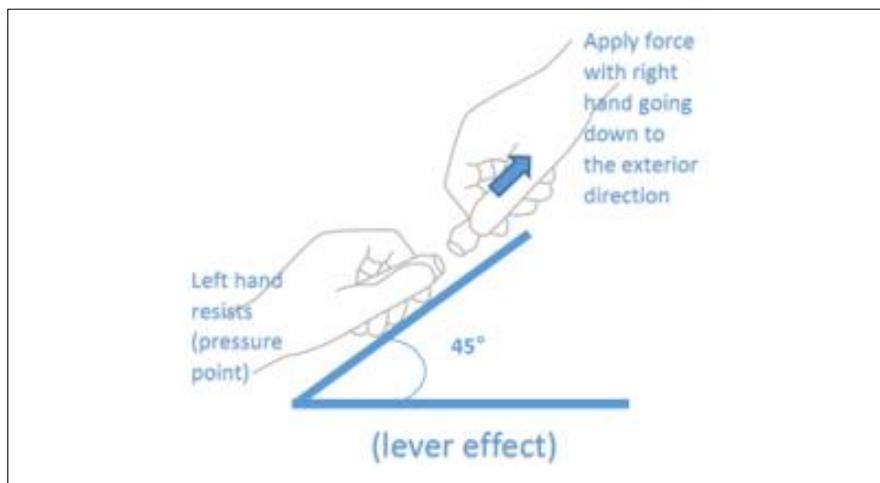

4/ Prélever le liquide pour reconstituer le vaccin.

Si l'ampoule (le corps ou la tête de l'ampoule) se casse en plusieurs morceaux à l'ouverture, il faut la jeter et en utiliser une autre. Dans ce cas, veuillez communiquer avec GSK pour déposer une plainte concernant le produit.

Si vous avez des questions, veuillez communiquer avec le service à la clientèle de GSK par téléphone au 1-800-387-7374 ou par courriel à cacsu@gsk.com.